

デジタル純水計 取扱説明書

EW-1000



注意

取扱いを誤った場合に、取扱者が障害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで



本 社 ・ 〒152-0001 ・ 東京都目黒区中央町2-37-7
 ・ TEL: 03-3716-5151 (代) ・ FAX: 03-3710-4552
 大 阪 ・ TEL: 06-6538-0365 (代) ・ FAX: 06-6538-0315
 メールアドレス ・ webtrade@line.co.jp
 ホームページ ・ http://www.line.co.jp

この度は当社のデジタル純水計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

⚠️ ご使用上の注意

本器使用上のご注意

- ・ 本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
- ・ 本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 本器は防水型ではありませんので、本体に水がかからないように注意してください。
- ・ 本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
- ・ 電池を確実にケースに入れて使用してください。
- ・ 長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
- ・ 本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

3. 測定方法

- 1.) プローブをプローブ接続部に接続してください。
- 2.) 電源ONボタンを押して電源を入れてください。
- 3.) プローブ測定溶液に浸してください。
- 4.) 数値が安定するまでプローブの先端から気泡が取れるように数回プローブを振ってください。
- 5.) もし測定溶液の温度が変化しても、自動温度補償機能が働くため数分すれば安定した値が表示されます。
- 6.) 測定中に「HOLD」ボタンを押すと測定データが保持されます。保持されている間は、表示部にHOLDと表示されます。
 ・ 再び「HOLD」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され現在の測定値が表示されます。
- 7.) 電源OFFボタンを押して電源を切ってください。


※純水には非常に低い導電率値があるので、より正確な値が得られるようにプローブはいつも清潔にしておいてください。使用後は、蒸留水ですすぎほこりを避けて保管してください。

1. 仕様


● 本体	
型 式	EW-1000
表 示	LCD表示 文字高：21.5mm
測定範囲	0 ~ 1999 μ S
分解能	1 μ S
精度	表示値 \pm (3% + 1d) * 但し、23 \pm 5°Cの時
サンプリングタイム	約 0.4 秒
自動温度補償	0~50°C
使用温湿度範囲	0 ~ 50°C, 80%RH 以下
電 源	単 4 形乾電池 x 6 個
寸法/質量	本体：202 (H) X 68 (W) X 30 (D) mm 電極： ϕ 22 X 120mm 質量：約 330g (電極、電池含む)
付属品	取扱説明書 単 4 形乾電池 x 6 個 センサプローブ x 1 本

4. 電池交換

- 1.) ローバッテリー表示が表示された場合、電池交換を行ってください。
- 2.) 下図のように電池カバーを開けてください。
- 3.) 下図のように単 4 形乾電池をケースに入れてください。
- 4.) 下図のように電池カバーを閉めてください。

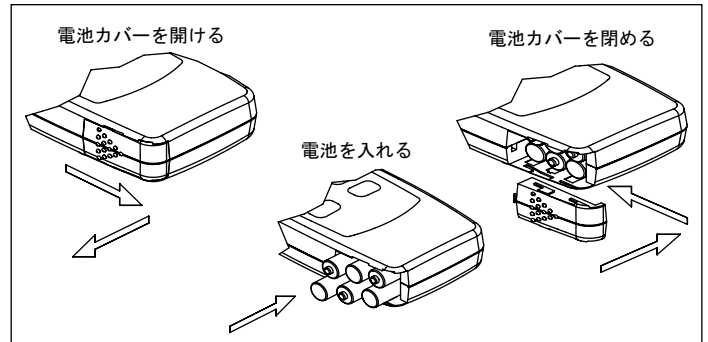

2. 各部の名称および機能

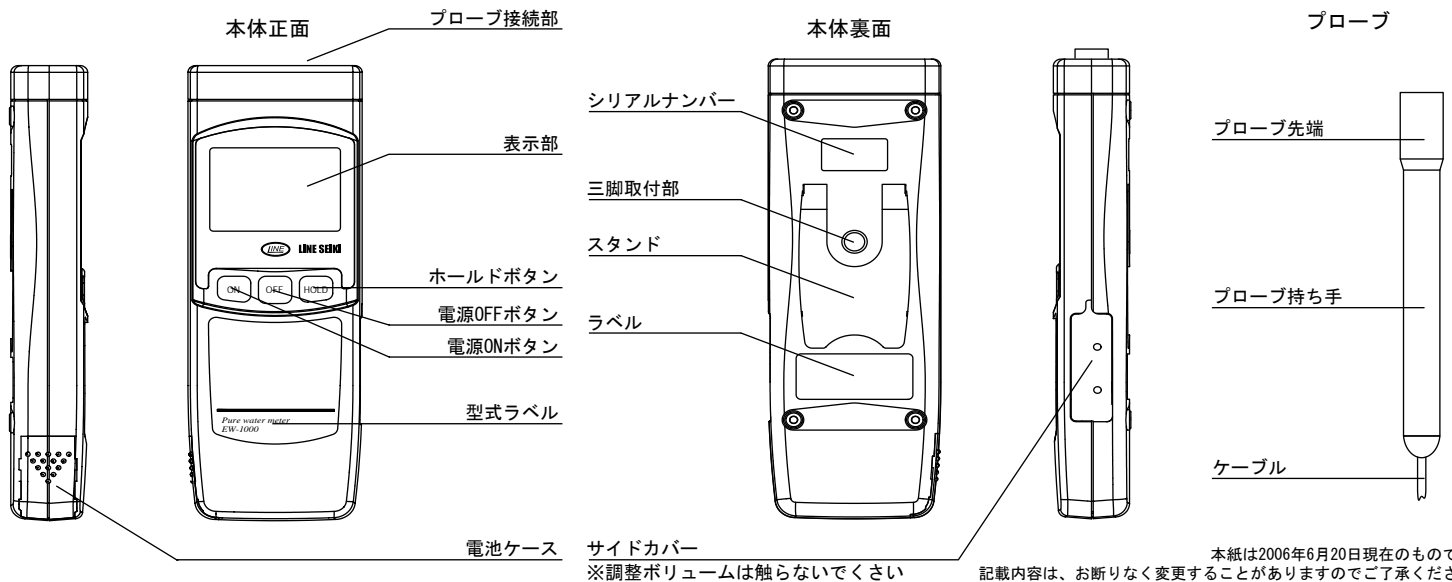

※調整ボリュームは触らないでください

本紙は2006年6月20日現在のものです。記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。All Rights Reserved. Copyright © 2006, LINE SEIKI CO., LTD.